

GAMME MULTIDYS ET FLUIDYS ENCASTRÉE






CAISSON MULTIDYS HORIZONTAL STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







Le caisson MULTIDYS assure la distribution des courants forts / faibles et des fluides médicaux. Il convient parfaitement à l'ensemble des services de plateaux techniques.

En bloc opératoire, il peut être utilisé comme gaine de doublage des fluides en cas d'utilisation de bras plafonniers TECH-CARE.

Vue de face

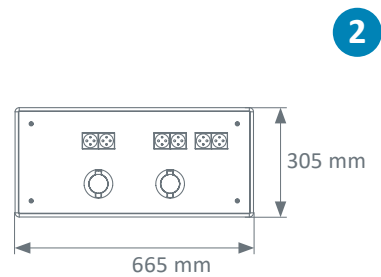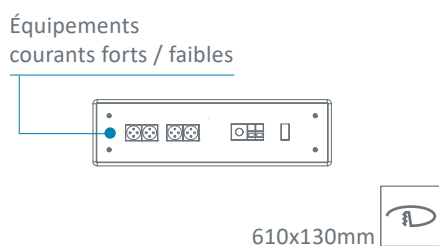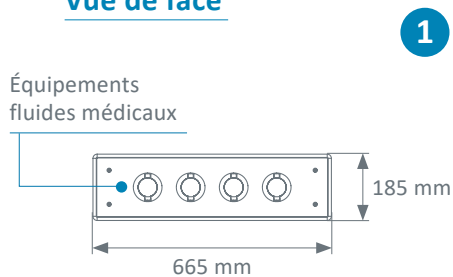

Vue en coupe

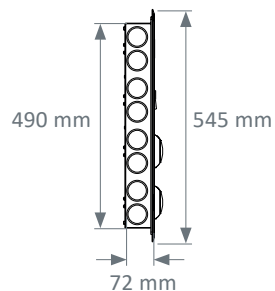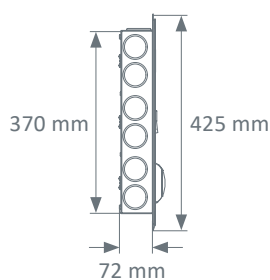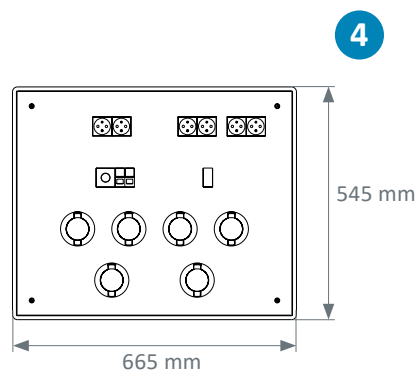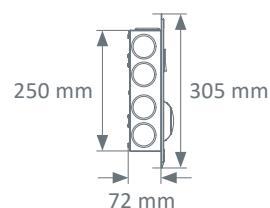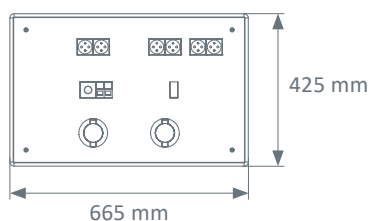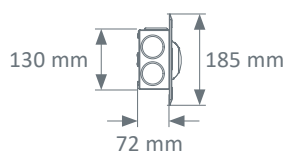


Alimentations

La MULTIDYS est conçue pour être alimentée :

- Par le plafond, par l'intermédiaire d'une remontée encastrée (A)
- Latéralement via deux points d'alimentation par compartiment (B)

A

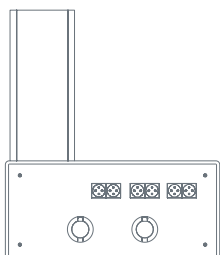


B



Installation

Grâce à son encastrement simple et rapide dans le mur, la gaine technique MULTIDYS offre un gain de temps et de main d'oeuvre.

Le maître d'oeuvre est tenu de prévoir un renfort sur la cloison pour l'installation de la MULTIDYS.

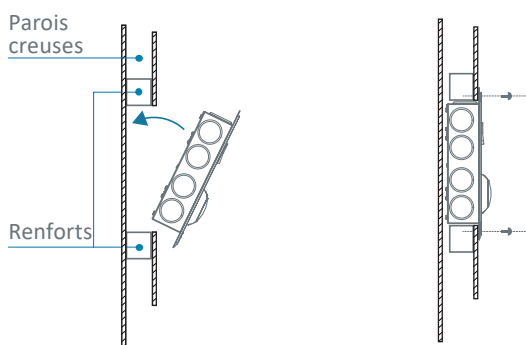

Coloris


	BLANC - RAL 9016	GRIS - RAL 9006	GRIS - RAL 7040
Façade aluminium standard	●	●	
Plastrons fluides	●		●





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les configurations sont également disponibles en versions horizontales.

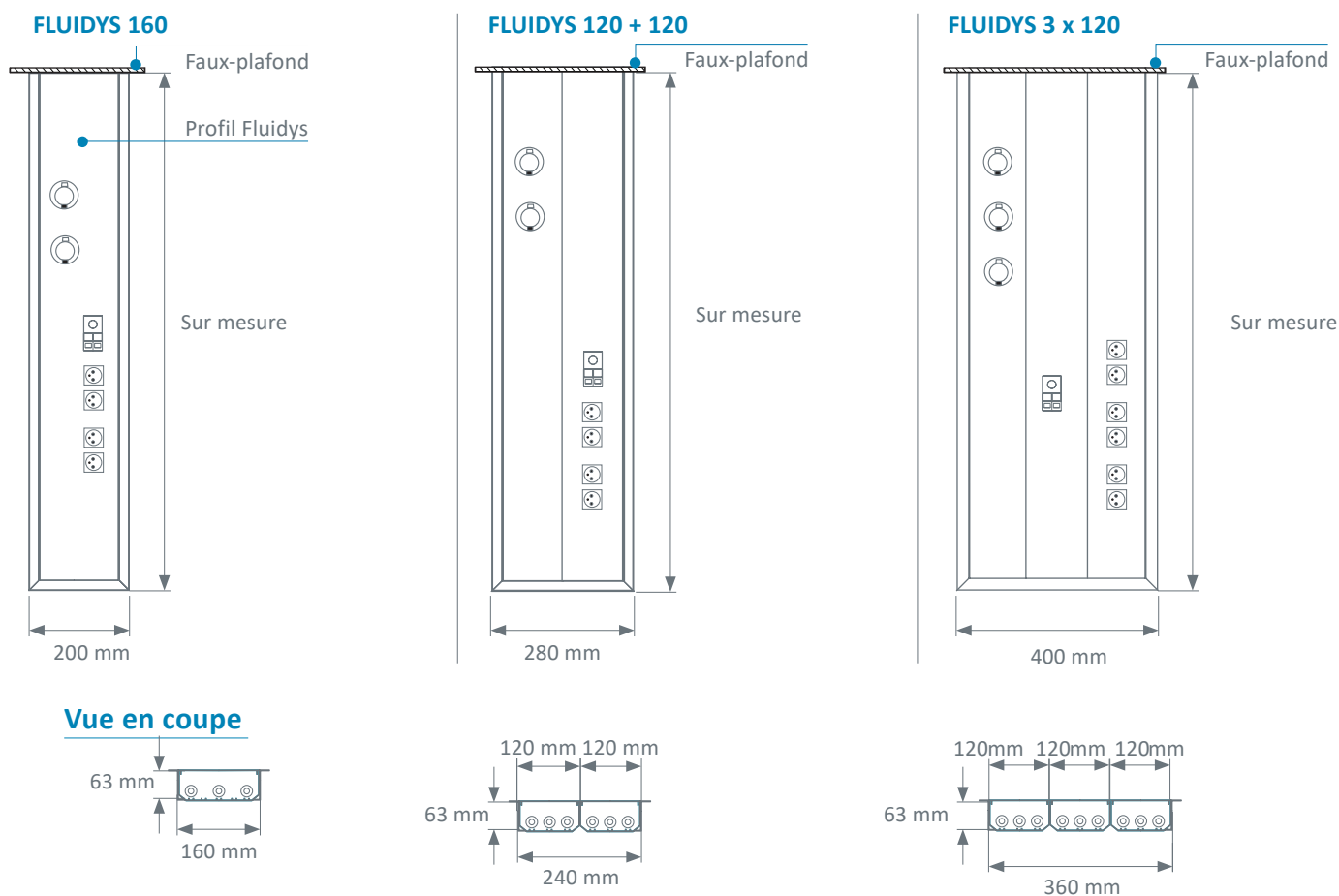


Alimentations

Ce produit est conçu pour être alimenté :

- Par le plafond, par l'intermédiaire d'une remontée encastrée (A)
- Latéralement via trois points d'alimentation par compartiment (B)

A


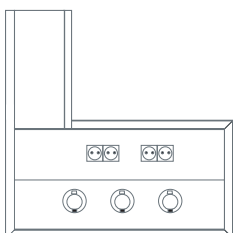


B



Installation

Grâce à son encastrément simple et rapide dans le mur, le produit offre un gain de temps et de main d'œuvre.

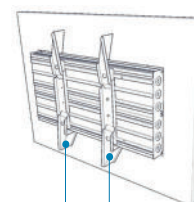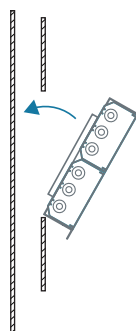

Brancard (optionnel)


Coloris

	BLANC - RAL 9016	GRIS - RAL 9006	GRIS - RAL 7040
Façade aluminium sur mesure	●	●	
Plastrons fluides	●		●




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de face

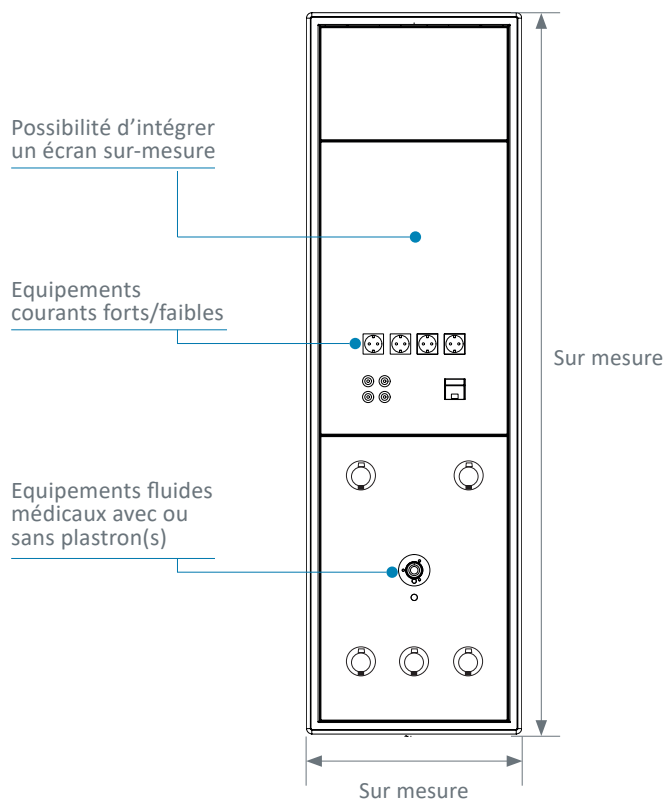

Vue en coupe de côté

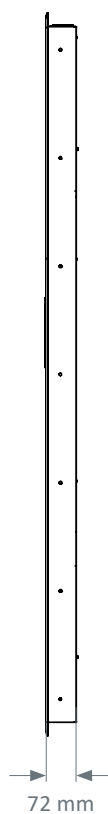

Vue en coupe du dessus





Le caisson de doublage MULTIDYS est entièrement conçu sur-mesure. Fabriqué en inox ou en acier peint RAL 9016, il permet d'assumer le doublage des différents équipements du bloc opératoire.

Le produit s'encastre dans la cloison, il est nécessaire de prévoir une profondeur minimum de 72 mm.

Installation

Grâce à son encastrement simple et rapide dans le mur, ce produit offre un gain de temps et de main d'oeuvre. Le maître d'oeuvre est tenu de prévoir un renfort sur la cloison pour l'installation de la MULTIDYS.

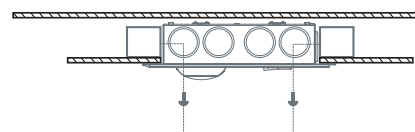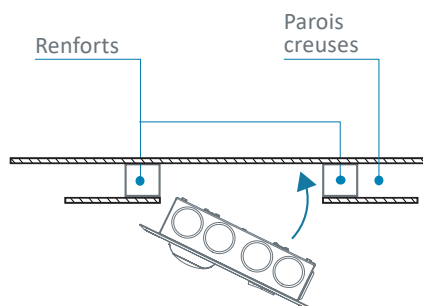



Normes & recommandations

- NF EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité,
- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE « Dispositifs Médicaux »,
- NF EN ISO 11197 : Gaines techniques à usage médical,
- NF EN ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1.

Gaines tête de lit, Appliques d'éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues,
Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux

